

Hemoccult II[®] BRAND

PRUEBA SERIAL PARA LA DETECCIÓN DE SANGRE EN LA MATERIA FECAL INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE - Hemoccult II[®] BRAND Slide (Test Card)

PRECAUCION: Asegúrese de leer y seguir las Instrucciones para el Paciente antes de someterse a la prueba.

Instrucciones de medicamentos

- **Siete** días antes de someterse a la prueba y durante la duración de la prueba, **evite** anti-inflamatorios no-esteroides, como ibuprofen, naprosen, o aspirina (mas de una aspirina para adultos al día).
- Puede tomar acetaminophen (Tylenol[®]) si es necesario.
- **Tres** días antes de someterse a la prueba y durante el periodo de duración de la prueba **evite** la vitamina C en exceso de 250 mg al día en forma de suplementos, frutas cítricas, y jugos.





Instrucciones de dieta

- **Tres** días antes de someterse a la prueba y durante el periodo de duración de la prueba, **evite** carnes rojas (res, cordero e hígado).
- Aliméntese con una dieta balanceada, incluyendo fibras como cereales integrales, frutas y vegetales.

Notas:

- ¹ Por favor consulte a su medico o boticario si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos que toma diariamente.
 - ² 100% del "RDA" de la vitamina C para adultos es 60 mg al día.
 - ³ Algunos suplementos de hierro contienen vitamina C en exceso de 250 mg.
- *Tylenol es una marca registrada de McNeil Consumer Products.

- Para una prueba mas precisa, se deben tomar muestras de evacuaciones de **tres días diferentes**.
- No tome muestras si nota la presencia de sangre en su materia fecal o en su orina (por ejemplo, por menstruación, hemorroides sangrantes, infección en la orina). **Consulte a su medico**.
- Para obtener resultados más precisos, tome la muestra antes de que haga contacto con el agua del inodoro. Puede usar cualquier recipiente limpio y seco.
- Cuando termine con la ultima sección, envíela a su doctor o laboratorio de inmediato; cuando el medico o laboratorio desarrolle la prueba, no deben haber pasado mas de 14 días desde el día de la primera muestra.
- Proteja la laminilla portaobjetos del calor, luz, y quimicos volátiles (yodo, lejía, amoníaco, cloro, y otros limpiadores caseros).
- Elimine los quimicos limpiadores del inodoro y descargue el inodoro dos veces antes de tomar las muestras.

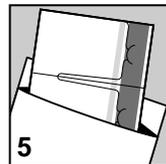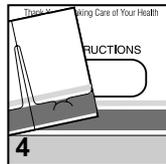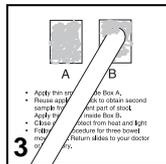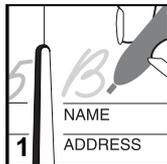

1. Retire la laminilla del sobre principal. Usando un bolígrafo, escriba su nombre, edad y dirección al frente de la sección 1 de la laminilla. **No separe las secciones de la laminilla.**
2. Antes de la evacuación, escriba la fecha del día en el cual toma la muestra en la sección 1 de la laminilla.
3. Abra la sección 1 de la laminilla. Use un palito para tomar una pequeña muestra. Aplique una capa delgada de la muestra de manera que cubra la casilla "A" completamente. Con el mismo palito, tome la segunda muestra de otra parte de la materia fecal. Aplique una capa delgada de muestra de manera que cubra la casilla "B" completamente. Tire el palito en la basura.
NO TIRE EL PALITO EN EL INODORO.
4. Cierre y asegure la casilla de la sección 1 introduciéndola debajo de la lengüeta. Guarde la laminilla portaobjetos dentro del sobre de papel hasta el día siguiente.
IMPORTANTE: Esto permite que la muestra se seque adecuadamente.
5. Repita los pasos 2-4 por los próximos dos días, usando las secciones 2 y 3 de la laminilla portaobjetos. Cuando complete la última sección, guarde la laminilla en el sobre de papel para que se seque al aire. El próximo día, saque la laminilla portaobjetos del sobre de papel y colóquela en el sobre especial (saco postal), si éste le ha sido proporcionado. Selle el sobre especial cuidadosamente. **Envíe a su medico o laboratorio inmediatamente.**

Nota: Los reglamentos postales vigentes prohíben enviar en sobres comunes de papel las laminillas de materias fecales.

NO ENVÍE LAS MUESTRAS A BECKMAN COULTER, INC.

Beckman Coulter, Inc.
Fullerton, CA 92834-3100

Para ordenar mas Instrucciones, llame al 1 (800) 352-3433
Para ayuda técnica, llame al 1 (800) 877-6242 o por correo electrónico:
askpcd@beckman.com